



БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА ТМ 300

The TM 300 Drum Mill is utilized for preparing granules and powders through a grinding process conducted in either dry or wet conditions. This versatile grinder can function as either a Ball or a Rod Mill by employing the corresponding module. To ensure an efficient grinding process, it is essential to use a sufficient number of balls or rods. Depending on the sample material, a final fineness below 20 microns can be achieved.

The drum mill comprises a gear motor mounted on a robust steel frame, a set of separation grids, and a sample collector. The TM 300 is designed with a yoke and locking mechanism that facilitates easy access to the sample. Cleaning is made convenient by a quick-release locking mechanism, allowing effortless removal of the drum cover.

The TM 300 accepts sample volumes up to 9 l and is therefore also suited for upscaling processes.



[Смотреть видео](#)

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

BENEFITS AT A GLANCE

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

SAFE AND CONVENIENT OPERATION

The TM 300 stands out for its user-friendly features. The easy tilt mechanism facilitates the swift and uncomplicated emptying of the grinding jar. The removable sample collector simplifies the sample retrieval process, making it convenient for operators to access their collected materials.

The solid noise-protection hood contributes to a quieter and more comfortable working environment.

The TM 300 is equipped with an emergency switch, providing a quick

and reliable means to halt the milling process in case of unforeseen circumstances, underscoring the commitment to user safety.

The redesigned drums and drum covers of the TM 300 feature improved handling, allowing the lid to be secured with just one screw for a perfect seal, even during wet grinding.

PARAMETER SETTING

Process parameters like grinding time or start/stop are conveniently set via the TM 300's large display interface. Settings include:

- | Variable speed from 1 to 80 rpm
- | Grinding time of up to 99:59:59 h:min:s
- | Rotation direction, e. g. to reduce caking effects
- | Programmable interval & break options for temperature-sensitive samples
- | Delayed start function




БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

ACCESSORIES FOR EFFECTIVE GRINDING PROCESSES


Catering to various application needs, the TM 300 offers standard **grinding drums** ranging from 5 to 43.4 liters. This ensures that the mill is adaptable to a wide spectrum of processing tasks.

An optional **separation grid** provides convenient separation of balls and sample after the grinding process. It is suitable for grinding balls sized 10, 20 or 30 mm. A connection for dust extraction prevents release of dust.

The grinding jar comes equipped with a **gasket**, ensuring a secure seal for loss-free milling operations. This feature not only enhances the efficiency of the process but also minimizes the risk of material waste.

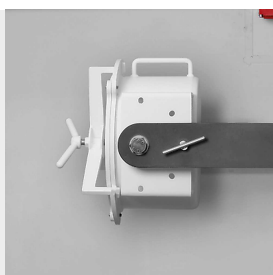

5-liter Grinding drum

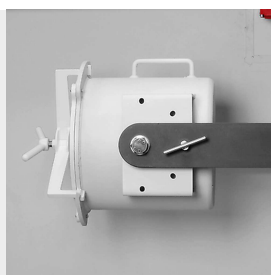

21.7-liter Grinding drum



Separation grid

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА ТМ 300

DRUM FILLING LEVEL FOR GRINDING BALLS AND RODS

While the maximum sample feed size depends on properties like hardness and breaking behaviour, a particle size of approximately 5 mm is ideal for the TM 300. Larger sizes are acceptable but should not exceed 15 mm. For sample lumps which break very easily or for deagglomeration effects, a feed size between 20 and 30 mm is feasible. For such easy-to-process samples, the sample filling level may be increased to 9 l.

If special drums of stainless steel 1.4404 in sizes 21.7 / 10 / 5 l together with grinding balls of steel 1.4404 are employed, it is possible to carry out **wet grinding** in the TM 300. The total filling volume for wet grinding may exceed the recommended amount for dry grinding. It may be helpful to use a large number of small grinding balls to increase friction.

Grinding drum	Mass of grinding balls	Grinding ball size (mm)	Number of rods	Optimum sample volume (l)
5 l	10 kg	<5 10 20 30	-	1 - 1.5
10 l	до 20 kg	<5 10 20 30	-	2 - 2.5
21.4 l	40 kg	<5 10 20 30	-	4 - 5
43.4 l	-	-	8	9

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

FIVE DRUM POSITIONS FOR CONVENIENT HANDLING

The user can set the grinding drums in five different positions which are secured by a screw. This ensures easy filling and emptying of the drum but also improves the mixing and grinding process. The largest rod module of 43.4 l cannot be brought into the mixing position due to lack of space.



Filling position




Mixing position



Grinding position



Emptying position

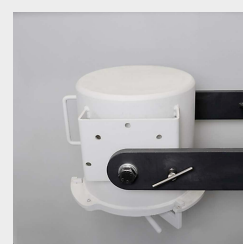


Complete emptying position

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

THE SOLUTION FOR EFFICIENT AND SUSTAINABLE CO-CRYSTAL SYNTHESIS

The TM 300 is capable of meeting the demands of modern pharmaceutical manufacturing. This can be demonstrated by the example of the mechanochemical synthesis of rac-Ibuprofen:Nicotinamide co-crystals. The TM 300 is an environmentally friendly alternative to conventional solution-based methods. In just 90 minutes, 3.2 kg of co-crystals with a yield of 99 % were produced, using only minimal amounts of solvent in the so-called liquid assisted grinding (LAG) process. This reduces energy consumption compared to conventional methods and drastically minimizes environmental impact.

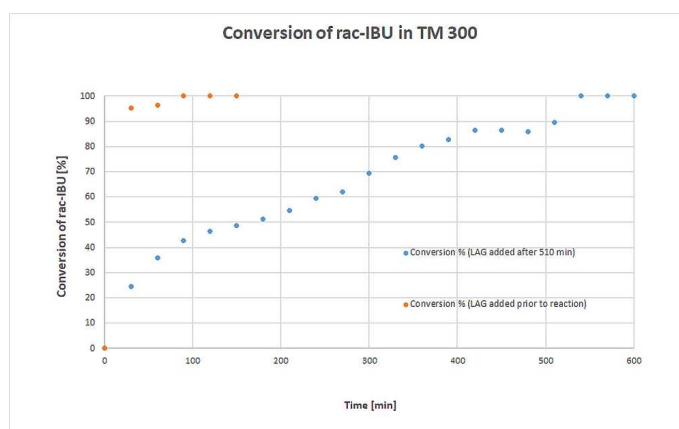

Conversion of rac-IBU. Blue plot: neat grinding approach with addition of 10 kg of balls (d = 10 mm) after 270 min and 10 kg of balls (d = 30 mm) after 360 min; addition of LAG additive EtOH after 510 min. Orange plot: LAG-assisted approach with EtOH added prior to the reaction and 20 kg balls 10 mm.

Results presented by the research group of Michael Felderhoff [1]

TM 300 enables mechanochemical processes to be carried out on a kilogram scale, opening up new possibilities for sustainable industrial manufacturing processes. Particularly interesting is the minimal metal abrasion – the measured values were well below concerning levels and significantly lower than, for example, in eccentric vibratory mills. The table shows the minimal abrasion values in the TM 300 during the test run.

Образец	Al [ppm]	Cr [ppm]	Co [ppm]	Fe [ppm]	Ni [ppm]
Raw material IBU	11.3	39.0	25.7	71.9	34.9
Raw material Nicotinamid	8.9	33.3	26.7	40.0	33.3
Co-crystals after 30 min	10.8	35.9	30.8	51.3	38.5
After 60 min	11.0	37.0	31.7	63.4	39.6
After 90 min	17.2	43.8	35.9	64.6	45.3

SETUP:

- | 2,03 kg rac IBU; 1,20 kg NIC
- | 10 l drum for wet grinding, 20 kg 10 mm grinding balls stainless steel
- | LAG Ethanol 0.1 ml/g
- | 60 rpm for 90 min
- | 99 % yield

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

SPECIAL APPLICATION: BOND INDEX TEST

Another application area of the TM 300 is Bond Index Testing. The Bond Work Index is used to assess the grinding efficiency and to calculate the necessary grinding power when choosing comminution equipment in the design phase of, for example, a mining plant. Precise determination of BWI is crucial for the accurate design and estimation of costs linked to the comminution process in industries like cement, mining or steel.

Both the Ball Mill and the Rod Mill module can be used for the process. At least 15 to 20 kg sample material is required to simulate a closed grinding circuit.

BALL MILL MODULE

The Ball Mill Work Index (BWI) is used for the range from 2.1 mm down to 100 µm. The sample needs to be pre-crushed to particle sizes as defined below.

- | Minerals: < 3.35 mm and sieved
- | Drillcore: < 3.35 mm and sieved
- | Half Drillcore: < 3.35 mm and sieved

The optimum number of grinding balls is 285. With the ball diameters varying due to wear, the overall number should be adjusted from time to time to ensure a total mass of 20.125 grams.

The grinding jar of the Bond Index Ball Mill measures 12" x 12" and has well-rounded corners.

ROD MILL MODULE

The Rod Mill Work Index (RWI) is used for particle size determination in a size range from 25 mm down to 2.1 mm. The sample needs to be pre-crushed to particle sizes as defined below.

- | Minerals: < 12.50 mm and sieved
- | Drillcore: < 12.50 mm and sieved
- | Half a drillcore: < 12.50 mm and sieved

The grinding jar for the Bond Index Rod Mill is 12" x 24" in size and has a wave-shaped design.

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА ТМ 300

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Барабанные мельницы RETSCH по-настоящему универсальны. Они измельчают такие материалы как: активированный уголь, бентонит, бетон, бумага, волокна, волосы, гидроксипатит, гипс, глина, древесина, известняк, каолин, катализаторы, кварц, керамика, кокс, компост, кости, краски и лаки, лом электроники, минералы, оксиды металлов, осадки сточных вод, отходы, пигменты, полимеры, полудрагоценные камни, почва, растения, руды, семена, сплавы, стекло, табак, ткани, углеродные волокна, уголь, фармацевтические препараты, химические вещества, целлюлоза, цементный клинкер, шлак и т. д.

ТВЁРДЫЙ-ХРУПКИЙ: КЕРАМИКА



5 l sample
21.7 l ball module
Pre-grinding:
40 kg x 20 mm grinding balls
4 h at 60 rpm
Fine grinding:
40 kg x 10 mm grinding balls
5 h at 60 rpm

ТВЁРДЫЙ-ХРУПКИЙ: ПЛАСТМАССЫ




4.5 l sample
21.7 l ball module
Pre-grinding:
40 kg x 30 mm grinding balls
3 h at 60 rpm
Fine grinding:
40 kg x 10 mm grinding balls
4 h at 60 rpm

СРЕДНЕЙ ТВЁРДОСТИ: ПОЧВА



25 kg sample
43.4 l rod module
8 grinding rods
1 h at 80 rpm

FIBROUS-TOUGH: SAWDUST

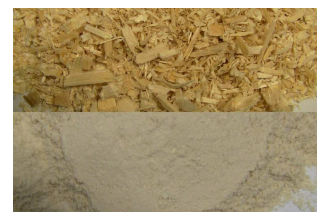

4.2 l sample
21.7 l ball module
40 kg x 30 mm grinding balls
5 h at 70 rpm

Чтобы найти наилучшее решение для Ваших задач пробоподготовки, воспользуйтесь нашей базой данных по применениям

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА ТМ 300

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В барабанной мельнице измельчаемый материал помещается внутрь барабана с мелющими шарами и подвергается воздействию внешних сил.

Шаровая мельница используется для тонкого измельчения твердых материалов при помощи сил удара и трения в сухом виде. Барабан, в который загружается измельчаемый материал и шары, вращается вокруг горизонтальной оси. В то время как крупный материал лучше измельчается при помощи шаров большого диаметра, мелкие шары позволяют получить существенно более высокую конечную тонкость.

The ball and the rod mill basically have the same concept comprising either a 12"x12" jar with grinding balls or a 12"x24" jar with grinding rods.

The jar is attached to a rotating yoke which is driven by a motor and can be placed in three different positions: Upwards for loading, horizontal for grinding, downwards for discharging.

To carry out the Bond Index test the pre-defined number of grinding balls or grinding rods is required. The electronic control integrated in the drive is equipped with an overload protection and permits and controls different speeds.

During the grinding process the difference in speeds between the balls / rods and grinding jar produces an interaction between frictional and impact forces, which releases the required comminution energy. The interplay between these forces produces a very effective degree of size reduction.

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА ТМ 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применения	pulverizing, mixing used as Bond Index Tester: quantification of grindability of ores and minerals
Область применения	биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, сельское хозяйство, стекло / керамика, стройматериалы, химия
Исходный материал	мягкий, твердый, хрупкий, волокнистый - сухой или влажный
Принцип измельчения	трение
Исходный размер частиц*	< 20 mm used as Bond Index Tester: < 3.35 mm with ball module / 12.50 mm with rod module
Конечная тонкость*	< 20 µm used as Bond Index Tester: < 100 µm with ball module / 2,100 µm with rod module
Размер загрузки / полезный объем*	minimum 1 l / maximum 9 l used as Bond Index Tester: min. 15 kg with ball module / min. 20 kg with rod module
Скорость вращения барабана	1 - 80 min ⁻¹ used as Bond Index Tester: 70 min ⁻¹ with ball module / 46 min ⁻¹ with rod module
Количество размольных мест	1
Материал размольной гарнитуры	закаленная сталь, stainless steel used as Bond Index Tester: hardened steel
Объемы размольных барабанов	5 l / 10 l / 21.7 l / 43.3 l used as Bond Index Tester: 21.7 l with ball module / 43.3 l with rod module
Установка времени измельчения	цифровое
Привод	3-фазный асинхронный двигатель с частотным преобразователем
Мощность привода	0,75 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная

Степень защиты	IP 41
Потребляемая мощность	~ 1800 VA
Ш x В x Г в закрытом виде	1500 x 1200 x 700 мм
Вес нетто	~ 306 kg
Стандарты	CE

*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора

REFERENCES

[1] Jan-Hendrik Schöbel, Frederik Winkelmann, Joel Bicker, and Michael Felderhoff; Mechanochemical kilogram-scale synthesis of rac:ibuprofen:nicotinamide co-crystals using a drum mill; RSC Mechanochemistry, 2025, DOI: 10.1039/D4MR00096J

www.retsch.com/tm300

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАРАБАННАЯ МЕЛЬНИЦА TM 300

DRUM MILL TM 300 FOR DRY GRINDING

COMPLETE INCL. DRUM, BASE FRAME, COLLECTING UNIT WITH SEPARATING SCREENS FOR 20 MM BALLS
(PLEASE ORDER BALL FILLING/ROD FILLING SEPARATELY)

Drum

21.301.2001		TM 300	230 В, 50/60 Гц	21,7 l	для шаров	сталь 1.0037
21.301.2002		TM 300	230 В, 50/60 Гц	10 l	для шаров	сталь 1.0037
21.301.2003		TM 300	230 В, 50/60 Гц	5 l	для шаров	сталь 1.0037
21.301.2004		TM 300	230 В, 50/60 Гц	43.4 l	для стержней	сталь 1.0037

исполнения для других электрических сетей доступны по такой же цене

DRUM MILL TM 300 FOR WET GRINDING

COMPLETE INCL. DRUM, BASE FRAME, COLLECTING UNIT WITH SEPARATING SCREENS FOR 20 MM BALLS
(PLEASE ORDER BALL FILLING/ROD FILLING SEPARATELY)

Drum

21.301.2005		TM 300	230 В, 50/60 Гц	21,7 l	для шаров	stainless st. 1.4404
21.301.2006		TM 300	230 В, 50/60 Гц	10 l	для шаров	stainless st. 1.4404
21.301.2007		TM 300	230 В, 50/60 Гц	5 l	для шаров	stainless st. 1.4404

исполнения для других электрических сетей доступны по такой же цене

DRUM MILL TM 300 FOR BOND INDEX TESTING

INCL. DRUM, BASE FRAME, COLLECTING UNIT WITH SET OF SEPARATING SCREENS FOR BALLS/RODS
(PLEASE ORDER BALL FILLING/ROD FILLING SEPARATELY)

Drum

21.301.2008		TM 300	230 В, 50/60 Гц	21,7 l	with rounded corners	для шаров
-------------	---	--------	-----------------	--------	----------------------	-----------

21.301.2009



TM 300 230 В, 50/60 Гц 43.4 л with wave form для стержней

исполнения для других электрических сетей доступны по такой же цене

ACCESSORIES TM 300 FOR DRY GRINDING

BALL FILLINGS/ROD FILLING FOR DRY GRINDING, ,

23.455.0018	Комплект (20 kg) шаров, 30 мм Ø	сталь 1.3505
-------------	---------------------------------------	--------------

23.455.0015	Комплект (20 kg) шаров, 20 мм Ø	сталь 1.3505
-------------	---------------------------------------	--------------

23.455.0019	Комплект (20 kg) шаров, 10 мм Ø	сталь 1.3505
-------------	---------------------------------------	--------------

23.455.0020	Комплект (20 kg) шаров, 5 мм Ø	сталь 1.3505
-------------	--------------------------------------	--------------

23.455.0035	Комплект (8 kg), 20 mm Ø (6 kg), шаров, 10 mm Ø (6 kg) 30 мм Ø	сталь 1.3505
-------------	--	--------------

23.455.0016	Rod (8 pcs.) filling (for drum 43.4 л only)	сталь 1.3505
-------------	--	--------------

DRUMS FOR DRY GRINDING, ,

23.462.0056	Барабан для шаров 5 л	Stahl 1.0037
-------------	--------------------------	--------------

23.462.0058	Барабан для шаров 10 л	Stahl 1.0037
-------------	---------------------------	--------------

23.462.0060	Барабан для шаров 21,7 л	Stahl 1.0037
-------------	-----------------------------	--------------

23.462.0062	Барабан для стержней	Stahl 1.0037
-------------	----------------------	--------------

43,4 л

ACCESSORIES TM 300 FOR WET GRINDING

BALL FILLINGS FOR WET GRINDING, ,

23.455.0021	Комплект (20 kg) шаров, 30 мм Ø	нержавеющая сталь 1.4404
23.455.0022	Комплект (20 kg) шаров, 20 мм Ø	нержавеющая сталь 1.4404
23.455.0023	Комплект (20 kg) шаров, 10 мм Ø	нержавеющая сталь 1.4404
23.455.0024	Комплект (20 kg) шаров, 5 мм Ø	нержавеющая сталь 1.4404
23.455.0036	Комплект (8 kg), 20 mm Ø (6 kg), шаров, 10 mm Ø (6 kg) 30 мм Ø	нержавеющая сталь 1.4404

DRUMS FOR WET GRINDING, ,

23.462.0057	Барабан для шаров 5 л	нержавеющая сталь 1.4404
23.462.0059	Барабан для шаров 10 л	нержавеющая сталь 1.4404
23.462.0061	Барабан для шаров 21,7 л	нержавеющая сталь 1.4404

ACCESSORIES TM 300 FOR BOND INDEX TESTING

BALL FILLINGS/ROD FILLING FOR BOND INDEX TESTING

73.455.0018	Ball filling	сталь 1.3505 for drum 12" x 12"/21,7 l
73.455.0019	Комплект стержней	сталь 1.0037 for drum 12" x 24"/43,4 l

исполнения из стали других марок доступны по запросу

DRUMS FOR BOND INDEX TESTING

23.462.0063	Барабан with rounded corners 21,7 л	для шаров	сталь 1.0037
23.462.0064	Барабан with wave form 43,4 л	для стержней	сталь 1.0037

исполнения из стали других марок доступны по запросу

ACCESSORIES TM 300 FOR DRY GRINDING AND WET GRINDING

РАЗГРУЗОЧНЫЕ РЕШЁТКИ

03.407.0144	Разгрузочная решётка 28 мм, для шаров 30 мм Ø
03.407.0141	Разгрузочная решётка 15 мм, для шаров 20 мм Ø
03.407.0142	Разгрузочная решётка 8 мм, для шаров 10 мм Ø