



MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

Professionele Monstervoorbereiding van Levensmiddelen

De messenmolen GRINDOMIX GM 200 is het ideale instrument voor het malen en homogeniseren van voedingsmiddelen en diervoeders. Met twee scherpe, robuuste messen en een krachtige motor van 1000 W kunnen monstervolumes tot 0,7 liter snel en effectief worden verwerkt.

De GM 200 is niet alleen ideaal voor het homogeniseren van stoffen met een hoog water-, olie- of vetgehalte, maar is ook perfect geschikt voor het vermalen van droge, zachte en middelharde producten. Het snelle homogenisatieproces zonder noemenswaardige temperatuurstijging zorgt voor behoud van vluchtige monstercomponenten.

Dankzij reproduceerbare instelling van parameters, programma's en sequenties, zorgt deze molen voor analytische resultaten met minimale standaardafwijking.

Deze kenmerken plus de brede selectie van deksels en containers, waardoor aanpassing van de molen aan individuele toepassingsvereisten mogelijk is, maken de GRINDOMIX GM 200 tot een professioneel apparaat dat superieur is aan elke commerciële huishoudelijke mixer.



[Klik om video te bekijken](#)



DE STANDAARD IN DE VOEDSEL INDUSTRIE

- | Grondige vermaling en homogenisatie van het gehele monster in enkele seconden
- | Voor- en fijnvermalen in één enkele molen
- | Variabel toerental tot 10.000 min⁻¹ plus Boost functie met 14.000 min⁻¹ voor verbeterde homogenisatie van taaie of kleverige monsters
- | Geschikt voor monstervolumes tot 700 ml
- | Cryokit beschikbaar voor het koud vermalen met droog-ijs
- | 8 programma's en 4 programma-cycli kunnen opgeslagen worden
- | Optionele zwaartekrachtdeksels of volume reducerende deksels voor automatische volume aanpassing van de maalkamer
- | Alle onderdelen in contact met het monster zijn autoclaveerbaar

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

CRYOGEEN MALEN MET DROOG-IJS

Voor het verwerken van taaie of elastische materialen die niet gehomogeniseerd kunnen worden bij kamertemperatuur, is er een Cryokit beschikbaar om veilig en efficiënt malen met droog-ijs mogelijk te maken. Het bestaat uit drie componenten:



[Klik om video te bekijken](#)

| Cryo deksel

Het onderste deel is gemaakt van roestvrij staal, de zijdelingse openingen laten het verdampte CO₂ door tijdens het cryogeen malen; het bovenste deel is het standaard PP deksel.

| Roestvrij stalen container met ribbels

De ribbels dragen bij aan het grondiger mengen van het monster.

| Volledig metalen mes

Dit mes heeft 2 bladen en is noodzakelijk voor cryogeen malen. Het is ook geschikt voor het snijden van harde monsters.

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200


EENVOUDIGE EN VEILIGE BEDIENING

De GM 200 is uitgerust met een 4,3 " aanraakscherm voor eenvoudige parameterinstelling, SOP-opslag (=methodes) en directe toegang tot het MyRETSCH-webportaal via QR-code. 8 standaard bedieningsprocedures en 4 programmacycli kunnen worden opgeslagen voor routinematige bewerkingen. Voor en na het maalproces kan de container met deksel, ingestoken mes en monster als een complete eenheid worden geïnstalleerd en verwijderd.

COMFORTABEL 4.3" AANRAAKSCHERM



TOEGANG TOT DE MYRETSCH WEB PORTAAL

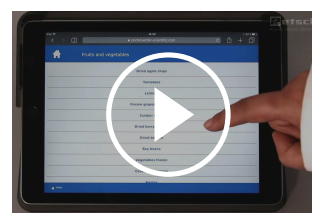

[Klik om video te
bekijken](#)

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

ZWAARTEKRACHTDEKSEL PAST HET VOLUME VAN DE MAALKAMER AAN TIJDENS HET MALEN

RETSCH heeft een zwaartekrachtdeksel ontwikkeld dat het volume van de maalcontainer verkleint, waardoor wordt voorkomen dat het monster aan het homogenisatieproces ontsnapt door zich aan de wanden van de container te hechten. Het deksel zakt tijdens het malen door zijn eigen gewicht en rust steeds rechtstreeks op het monster. Het resultaat is een grondige homogenisatie van het complete monstermateriaal. Het zwaartekrachtdeksel is ook verkrijgbaar met overloopkanalen. Het zorgt ervoor dat de celvloeistof die tijdens het malen van het monster vrijkomt, via deze kanalen naar het midden van de container wordt teruggevoerd, waardoor een perfecte homogenisatie mogelijk is.



MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

TOEBEHOREN & OPTIES

Een reeks verschillende containers, deksels en messen maakt de GRINDOMIX GM 200 tot een echt universeel apparaat, niet alleen geschikt voor het verwerken van voedsel- en voermonsters, maar ook voor een breed gamma aan materialen.

| Gepatenteerd zwaartekrachtdeksel

Past het maalkamer volume automatisch aan het monstervolume aan.

| Zwaartekrachtdeksel met overstroomkanalen

Ideaal geschikt voor monsters met hoog watergehalte.

| Roestvrij stalen container

Minimale slijtage bij het verwerken van harde monsters.

| Roestvrij stalen container met ribbels

De ribbels dragen bij aan het grondiger mengen van het monster.

| Reductie deksel

Reduceert de maalkamer tot 0.5 of 0.3 liter voor optimale homogenisatie van kleine monstervolumes.

| Gekarteld mes

Gebruikt voor bijzonder taaie monsters zoals vettig, vezelig vlees.

| Volledig metalen mes

Met 2 messen, het is geschikt voor koud malen en het snijden van harde monsters.

| Cryokit


Voor het homogensieren van monsters met droog-ijs



MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

TYPISCHE MONSTER MATERIALEN

RETSCH-messenmolens zijn geschikt voor een breed gamma aan toepassingen. Typische materialen zijn onder meer snoep, granen, kaas, omhulde tabletten, cacaonibs, voedingssupplementen, gedroogd en vers fruit, voederkorrels, vis, diepvriesproducten, ham, sla, vlees, noten, oliehoudende zaden, farmaceutische producten, plantaardig materiaal, worstjes, zeep, kruiden, groenten enz.

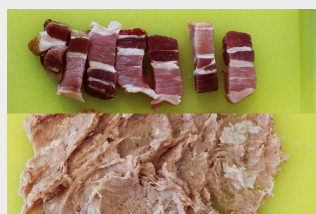

spek



snoepgoed



tomaten




rozijnen

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

PRINCIPE

Twee scherpe, robuuste messen roteren in het midden van de maalcontainer. Afhankelijk van de draairichting wordt een maal-effect met de botte zijde (voornamelijk voor-vermaling), of met de scherpe zijde (fijn-vermaling). Het mes wordt onrechtstreeks aangedreven met een krachtige motor van 1000 W.

De instelbare snelheid, die elektronisch bewaakt wordt, garandeert een optimale aanpassing aan specifieke vereisten van verschillende toepassingen en zorgt voor reproduceerbare maalresultaten.

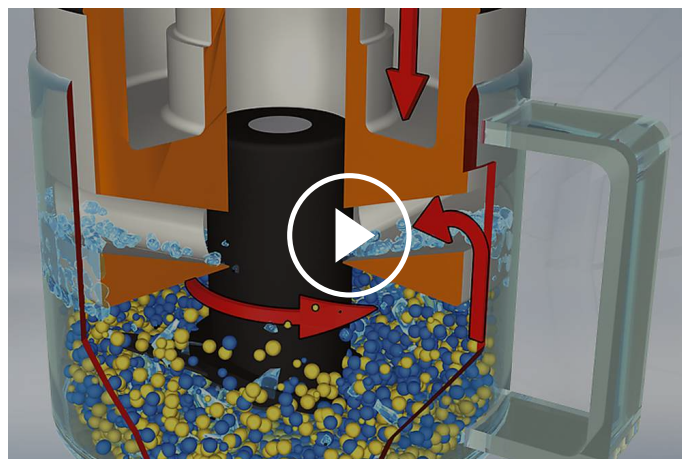

[Klik om video te bekijken](#)

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200 - TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingen	malen, homogeniseren en mengen
Toepassingsdomein	biologie, geneesmiddelen / medisch, landbouw, levensmiddelen
Toevoermateriaal	zachte, medium-harde, elastische, water / vet / oliehoudende materialen, vezelig / fibreus
Maalprincipe	snijden
Korrelgrootte materiaal*	40 mm
Eindfijnheid*	< 300 µm
Batchgrootte / Toevoerhoeveelheid*	met standaard deksel 700 ml met volume reducerend deksel 150-300 ml met zwaartekracht deksel 300 - 600 ml
Volume maalkamer	met standaard deksel 1000 ml met reductie-deksel 250 ml/500 ml met zwaartekracht deksel 400 - 800 ml
Instelling van het toerental	digitaal, 2.000 - 10.000 min-1 (14.000 min-1 BOOST)
Materiaal van maalwerktuigen	mes: roestvrij staal / titanium bevestiging mes: PVDF / roestvrij staal container: autoclaveerbaar plastic / plastic PP / roestvrij staal
Instelling maalduur	digitaal, 1 s - 3 min
Interval werking	Ja
Memoriseerbare standaardprocedures	8 programma's / 4 cycli
Aandrijving	serie motor
Aandrijfvermogen	~ 1000 W
Gegevens electriciteit	verschillende spanningen
Aansluiting electriciteit	mono fase
Beschermingsklasse	maalkamer en bedieningspaneel IP 42
Vermogen	~ 1000 W
B x H x D gesloten	350 x 275 x 392 mm (geopend: 350 x 410 x 553)
Netto gewicht	~ 10 kg
Standaarden	CE

*afhankelijk van toegevoerd materiaal en configuratie/instellingen van toestel

www.retsch.com/gm200

BESTELGEGEVENS

MESSENMOLEN GRINDOMIX GM 200

Knife Mill GRINDOMIX GM 200 complete with 1 litre grinding container of autoclavable plastic, standard lid and knife of stainless steel

20.254.0001  GM 200 220-240 V, 50/60 Hz

20.254.0002  GM 200 100-120 V, 50/60 Hz

TOEBEHOREN GM 200

MAALPOTTEN, 1 LITER

03.045.0057  Maalpot
autoclaveerbaar kunststof (transparant en krasbestendig)

03.045.0047  Maalpot
PP

03.045.0050  Maalpot
roestvrij staal

03.045.0072 Grinding container stainless steel with baffles for cryogenic grinding

DEKSELS VOOR MAALPOTTEN VAN AUTOCLAVEERBAAR KUNSTSTOF OF PP

03.107.0562  Standaarddeksel
PP

22.107.0022  Standaarddeksel
PP
100 stuks

03.107.0606  Reductie-deksel
PP
voor kamerreductie naar 0.25 liter

03.107.0310  Reductie-deksel
PP
voor kamerreductie naar 0.5 liter

02.107.0327  Zwaartekrachtdeksel
PP

02.107.0323  Zwaartekrachtdeksel
PP
met overloopkanalen

DEKSELS VOOR MAALPOTTEN VAN GLAS OF ROESTVRIJ STAAL

03.107.0562  Standaarddeksel
PP

22.107.0022  Standaarddeksel
PP
100 stuks

02.107.0328  Zwaartekrachtdeksel
PP

02.107.0308  Zwaartekrachtdeksel
PP
met overloopkanalen

02.107.0743 Cryo lid
stainless steel/PP

MESSEN

02.446.0047  Mes van roestvrij staal

02.446.0057  Knife of stainless steel with serrated blades

02.446.0048  Mes van puur titanium, voor vermaling zonder verontreiniging met zware metalen

22.446.0004  Full metal knife, for cryogenic grinding, 2 blades

CRYO KIT FOR CRYOGENIC GRINDING WITH DRY ICE

22.354.0005  Cryo kit, (incl. grinding container, stainless steel with beads, full metal knifewith 2 blades, cryo lid)

ADDITIONAL ITEMS GM 200

05.723.0001



Schraper

05.114.0117

O-ring 23 x 2

05.111.0239

Gasket V-ring

03.018.0038

Holder for grinding container

99.200.0031

IQ/OQ Documentation for GM 200