



ANALIZOR OXIGEN / AZOT / HIDROGEN

ELEMENTRAC ONH - ps

The new ELEMENTRAC ONH-ps is a powerful and robust elemental analyzer for the simultaneous determination of oxygen, nitrogen and hydrogen concentrations in inorganic samples such as steel, iron, copper or ceramics. The highly sensitive NDIR cells without moving parts and the thermal conductivity detector for nitrogen measurement reliably detect element concentrations from the low ppm range to the high percentage range.

Thanks to the novel sample lock with pulsed chamber purging and vertical fall channel, user-friendly and convenient analysis of rod-shaped, granular or powdery samples with a weighed portion of up to 2 grams is easily possible. The ELEMENTRAC ONH-ps elemental analyzer meets or exceeds the requirements of all common international standards, such as ASTM E 1019 or DIN EN 3976.



Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH- ps

- | Parallel determination of the three elements oxygen, nitrogen and hydrogen
- | New sensitive infrared measuring cells without moving parts
- | Low gas consumption and high sensitivity due to closed gas system
- | Easy application of pins, powders and granules
- | Inexpensive argon possible as carrier gas
- | Short analysis time
- | Powerful impulse furnace with 8.5 kW
- | Optional autocleaner and autoloader
- | Reliable ONH analysis for a wide range of inorganic samples such as steel, non-ferrous metals, ceramics, slags, ores, etc.

ELT


Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

PROBE TIPICE

oțel, cupru, aliaje, metale refractare, fontă, materiale ceramice, carbid, feroaliaje, fier, metale, Aluminiiu, silicon,
...



Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps
Operațiune și proces de analiză

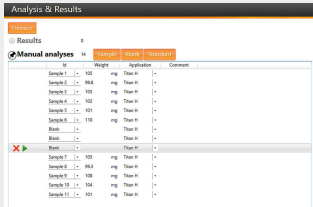

Pasul 1: Logarea probei în software-ul ELEMENTS

ID-ul eșantionului este conectat la software și greutatea este transferată automat (vezi pasul 2).

Pasul 2: Cântărirea și introducerea probei în portul probei

The ELEMENTRAC ONH-ps analyzes volumes from a few mg up to 2 grams safely and precisely. Rod-shaped or granular samples can be applied directly. For the elemental analysis of powders, a capsule is recommended which does not have to be sealed.

Pasul 3: Analiza

Creuzetul gol din grafit este apoi plasat pe electrodul inferior și analiza este pornită prin intermediul software-ului ELEMENTS. Software-ul controlează toți pașii de analiză ulteriori.

Pasul 4: date ieșire și exportul datelor

120-180 secunde după începerea analizei, concentrațiile măsurate sunt disponibile pentru export sub formă de raport sau prin LIMS.

THE NEW MEASUREMENT PROCEDURE

Common O/N/H analysis for inert gas fusion analyzers mean that a thermal conductivity cell is used for both hydrogen as well as for nitrogen analysis. This means that two independent measurements have to be performed when determination of nitrogen and hydrogen is required. The ELEMENTRAC ONH-ps utilizes a new designed water IR cell without moving parts which allows a reliable measurement of hydrogen as water even in the lower ppm concentration range. This allows the simultaneous measurement of oxygen, nitrogen and hydrogen in one sample.

Elemente	Măsurat ca	Detector
Oxygen	CO ₂	IR
azot	N ₂	TCD
Hidrogen (tehnica uzuală)	H ₂	TCD
Hidrogen(new technique)	H ₂ O	IR


Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

CONFIGURAȚII


ELEMENTRAC ONH-ps este un analizor multi-element pentru determinarea simultană a oxigenului, azotului și hidrogenului (ONH). Oxigenul este detectat sub formă de CO_2 , iar hidrogenul sub formă de H_2O în celule de măsurare în infraroșu, în timp ce azotul este determinat în formă elementală cu ajutorul unei celule de conductivitate termică. ELEMENTRAC ONH-ps utilizează heliu sau, alternativ, argon ca gaz purtător. ELEMENTRAC ONH-ps utilizează celule de măsurare în infraroșu nou dezvoltate, fără componente mecanice mobile. Aceste celule se caracterizează printr-un raport semnal/zgomot foarte bun și o stabilitate ridicată.

The ELEMENTRAC ONH-ps elemental analyzer is available as a single-element analyzer for hydrogen only, or in a multi-element configuration for measuring ONH. Whereas oxygen and hydrogen are determined as CO_2 and H_2O in up to three infrared cells, nitrogen is detected in its elemental form in a thermal conductivity cell.

DIFERITE LUNGIMI DE UNDĂ DISPONIBILE

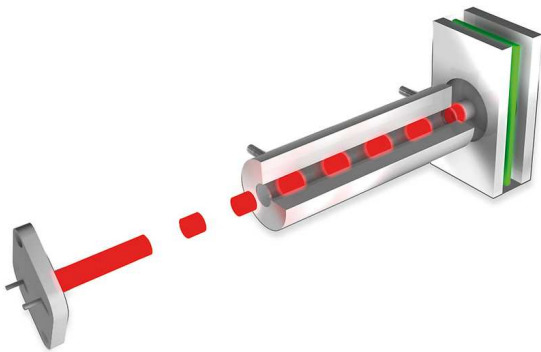

CELULĂ DE CONDUCTIVITATE TERMICĂ CU SENSIBILITATE RIDICATĂ

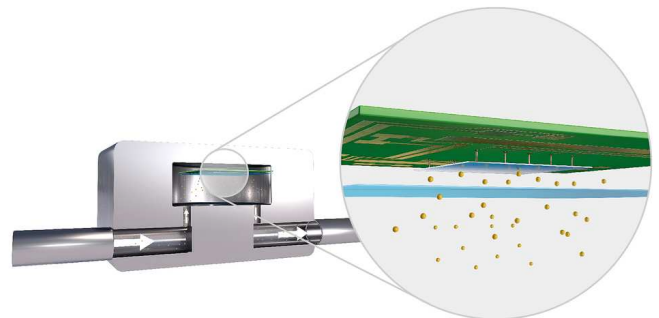

Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

SOLUȚII STANDARD INTEGRATE

The chemicals and filters required for operation of the elemental analyzer are arranged conveniently on the front panel and can be concealed behind a removable door during routine operation. This arrangement significantly reduces the time required for maintenance and increases user-friendliness. In addition, innovative details considerably improve the reproducibility of measurements.

Port de probă inovator și spălare cu cameră pulsată

The new sample port of the ONH-ps elemental analyzer ensures comfortable operation and reproducible measured values. Differently shaped materials like solid pieces, granules or powder in capsules can be applied up to a weight of 2000 mg, and are quickly freed from the surrounding atmosphere with the help of pulsed carrier gas flushing in the sample port. Then they drop vertically into the preheated graphite crucible for analysis.

- | Design constructiv ce previne producere de praf
- | Nu este necesară închiderea capsulelor
- | Aplicare directă de până la 2000 mg granulat
- | Întreținere și uzură reduse



Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

SOLUȚII STANDARD INTEGRATE

The chemicals and filters required for operation of the elemental analyzer are arranged conveniently on the front panel and can be concealed behind a removable door during routine operation. This arrangement significantly reduces the time required for maintenance and increases user-friendliness. In addition, innovative details considerably improve the reproducibility of measurements.

Catalizator puternic

During fusion of the sample CO is formed, whereas hydrogen and nitrogen are released in elemental form. The powerful catalyst furnace oxidizes CO to CO₂ and hydrogen to water, which are subsequently measured in the IR cells. The high temperature catalyst furnace with copper oxide filling guarantees the complete oxidation of CO to CO₂ and of course of H₂ to gaseous H₂O.



Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

SOLUȚII STANDARD INTEGRATE

The chemicals and filters required for operation of the elemental analyzer are arranged conveniently on the front panel and can be concealed behind a removable door during routine operation. This arrangement significantly reduces the time required for maintenance and increases user-friendliness. In addition, innovative details considerably improve the reproducibility of measurements.

control al debitului de gaz închis

The ELEMENTRAC ONH-ps elemental analyzer series uses a closed gas system in overpressure. This ensures that always 100% of the released sample gas is fed to the detectors which guarantees low detection limits and good reproducibility.

Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

OPTIUNI



Autocleaner

By melting the sample in a graphite crucible at temperatures of up to 3000 °C deposits are generated at the upper electrode and in the furnace chamber which may affect the reproducibility of ONH measurements in a negative way.

The new optional Autocleaner reliably removes these deposits, enabling precise elemental analysis even for high throughputs. Additionally, an efficient gas calibration and cleaning furnace for thorough carrier

gas pre-cleaning are available for the elemental analyzer.

NOU: Autoloader

High-capacity automated sample loading is becoming an increasingly important factor for fast and robust O/N/H analysis in metals. The new autoloader for the ELEMENTRAC ONH-ps features a sample carousel with 32 positions, as well as a correspondingly designed crucible magazine.



[Click pentru video](#)

Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

The ELEMENTRAC ONH-ps uses a measuring principle with a wide operating range. To analyse the sample, it is weighed and placed in the sample lock. Flushing with carrier gas ensures that no atmosphere (e.g. nitrogen and oxygen) enters the analysis chamber.

The graphite crucible is then annealed in the pulse furnace to reduce any contamination, such as residual hydrogen. After a stabilisation phase, the sample falls into the graphite crucible and is melted. Elemental nitrogen, hydrogen and carbon monoxide are released from the sample melt into the carrier gas stream. The carbon monoxide comes from the reaction of the carbon in the graphite crucible with the oxygen in the sample. The carrier gas (helium) and the sample gas pass through a dust filter before entering a copper oxide catalyst, where CO is converted to CO₂ and elemental hydrogen to H₂O.

The resulting CO₂ and H₂O are then detected in the infrared cells. CO₂ and H₂O are chemically removed and the nitrogen content is measured in the heat conduction cell.

Optionally, inexpensive argon can be used instead of helium as the carrier gas for determining oxygen and nitrogen.

Analizor Oxigen / Azot / Hidrogen ELEMENTRAC ONH-ps

DATE TEHNICE

Elemente măsurate	azot, hidrogen, oxigen
Probe	anorganice
Aliniere cuptor	vertical
Purtător de probă	creuzete de grafit
Domeniul de aplicare	automotive, aviation, metal production, metallurgy, quality control, research
Cuptor	cuptor cu impulsuri (max. 8,5 KW*), temperatură mai mare de 3000 °C
Metoda de detecție	infrared absorption for oxygen and hydrogen, thermal conductivity for nitrogen
Durață tipică de analiză	120 - 180 s
Reactivi necesari	hidroxid de sodiu, oxid de cupru, perclorat de magneziu
Gaze necesare	compressed air, helium 99.995 % pure, argon 99.995% pure (if required), all gases with (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Alimentare	3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Dimensiuni (W x H x D)	56 x 78 x 64 cm
Greutate	~ 165 kg
Echipament necesar	PC, monitor, balanță (rezoluție 0,0001)
Accesorii opționale	purificare gaz purtător, autocleaner, autoloader, external chiller
-	limited to 6,8 kw in application settings

www.eltra.com/onhps

INFORMAȚII DESPRE COMANDĂ

ELEMENTRAC® ONH-PS

(Please order PC, monitor, balance and consumables (starter-kit, anhydron, sodium hydroxide, schuetze reagent, copper II oxide) separately)

				Measuring ranges at 1,000 mg sample weight (further measuring range combinations on request)
88200-2300		ONH-ps	2xO	0.04 ppm – 1 % O
			+ 1xN	0.12 ppm – 3% N
			+ 1xH	0.10 ppm – 0.25 % H

REQUIRED ACCESSORIES

PC, MONITOR, BALANCE

71015-1000 Computer with Intel Core i5-8400 Processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operating system; keyboard; mouse

88400-0584 Monitor, TFT (23.8")

88400-0645 Balance (resolution 0.0001 g)

90200  Anhydron (magnesium perchlorate), 454 g 1)

90210  Sodium hydroxide, 500 g 1)

90289  Copper II oxide, 100 g, for ON-p and ONH-p 1)

88600-0021 Copper oxide wire (for older ONH 2000 analyzer) 1)

FURTHER OPTIONS AND CONSUMABLES

ACCESSORIES (HARDWARE)

88200-2400 ONH-p Autoloader (incl. autocleaner and vacuum cleaner)

88200-2401 ONH-p Autocleaner (incl. vacuum cleaner)

88400-0467 Chiller (SMC, 5900 W)

27000-2021 Gas calibration unit ELEMENTRAC series (for calibrating hydrogen)

88200-9000 Carrier gas purification furnace, without filling (please order filling and quartz wool separately)

72080 Nitrogen regulator, 1 piece

72081 Pressure regulator, 1 piece

88400-0610 Barcode scanner

CRUCIBLES

88400-0471 Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)

90190  Graphite crucibles, 400 pieces (for copper, brass and steel analysis)

90180  Inner graphite crucibles, 100 pieces (requires outer graphite crucible 90185)

90185  Outer graphite crucibles, 50 pieces

TIPS

31360  Graphite tip, 1 piece (for crucibles 90190 and 90185)

CAPSULES (REQUIRED FOR ANY KIND OF POWDER ANALYSIS)

90257  Nickel capsules, 3.2 x 7 mm, 100 pieces

90256  Nickel capsules, 4.5 x 10 mm, 250 pieces

88400-0066  Nickel capsules, pressed, 12.5 x 5 mm, 100 pieces

90252  Tin capsules, 5 x 18 mm, 100 pieces

BASKETS (REQUIRED FOR OXYGEN AND NITROGEN DETERMINATION IN REFRACTORIES)

90250  Nickel baskets, 100 pieces, 1 g each

88600-0012  Nickel baskets, high purity (low oxygen), 100 pieces, 1 g each

FLUXES (REQUIRED FOR SOME APPLICATIONS)

90251		Tin pellets, 454 g (for determination of hydrogen in titanium)
90800		Graphite, 50 g (improves oxygen determination)
90258		Nickel accelerator, 100 g (for analysis of high amount of refractories)

CHEMICALS (FILLINGS FOR GLASS AND QUARTZ TUBES)

88600-0028		Eltrasorb, 500g (black coloured sodium hydroxide)
90200		Anhydron (magnesium perchlorate), 454 g l)
90210		Sodium hydroxide, 500 g
90270		Schuetze reagent, 100 g, for OH-p and ONH-p
90289		Copper II oxide, 100 g, for ON-p and ONH-p
90426-1001		Filling for carrier gas purification furnace (suitable for one filling, ONH series)
90330		Quartz wool, 50 g
90331		Glass wool, 454 g
90332		Glass wool, 50 g
92610		Tube of high vacuum grease, 35 g

ELEMENTRAC - ADDITIONAL TOOLS

All ELEMENTRAC analyzers are equipped with a set of necessary tools

The following list provide part numbers for replacement of worn tools and some new tools to improve handling.

SPATULAS AND TWEEZERS

88400-0476		Micro spatula, 1 piece, XS size
------------	---	---------------------------------

23110		Spatula, 1 piece, M size
23111		Spatula, 1 piece, L size
88400-0475		Set with 6 spatula and 1 tweezers, for multiple weighing procedures
88400-0229		Tweezers (160 mm), curved, 1 piece, for transporting pins and baskets
88400-0472		Tweezers (145 mm), straight, 1 piece, for removing samples out of the ONH-p furnace
88400-0213		Tongs for crucibles, 1 piece, for putting crucibles on the electrode tip

TOOLS FOR STORAGE, TRANSPORTING AND WEIGHING

88400-0477		Weighing boat, 1 piece, for weighing and usage of granulates
36121		Quartz boat, 74x22x10 mm, 1 piece, for weighing pins

TOOLS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

27000-8007		O-ring set ONH-p (furnace)
27000-8008		Maintenance kit ONH-p
27000-8009		O-ring set ONH-p
71010		Brush, 16 mm, 1 piece, for cleaning balance from dust
88400-0500		Telescope mirror, 1 piece, for inspection of upper electrode of ONH-p/ONH-2000
88400-0473		Powder funnel (plastics), 1 piece, for easy filling of chemical tubes
88400-0489		Rubber plug 14x20x24 mm, 1 piece, for sealing small glass tubes like 88400-0006
88600-0027		Sodium hydroxide, Anhydron filter tube
71032		Composite brush, 1 piece, for cleaning upper electrode of ONH-p furnace

71035		Cleaning brush / furnace brush, 1 piece, for cleaning sample inlet of ONH furnaces
71031		Metal brush, 1 piece, for cleaning graphite tip and its holder
88400-0504		Cylinder brush, brass, for intensive cleaning of lower furnace
88400-0501		Micro brush, 1 piece, for cleaning of ONH series furnace outlet tube
61030		Allen key, 3 mm, 1 piece
61040		Allen key, 4 mm, 1 piece
61050		Allen key, 5 mm, 1 piece

CALIBRATION MATERIALS

Calibration materials may show slight variations depending on the current lot.

To see the current certification please visit www.ELTRA.com.

OXYGEN AND NITROGEN IN STEEL, PINS

91100-1001		Steel, 100 pins, 1 g each, 25 – 40 ppm N
91100-1002		Steel, 100 pins, 1 g each, 30 – 70 ppm N
91100-1003		Steel, 100 pins, 1 g each, 150 – 250 ppm N
91100-1005		Steel, 100 pins, 1 g each, 300 – 600 ppm N
91100-1007		Steel, 100 pins, 1 g each, 70 – 130 ppm N
91100-1010		Steel, 100 pins, 1 g each, >1000 ppm N
91100-1011		Steel, 100 pins, 1 g each, 600-1000 ppm N

HYDROGEN IN STEEL, PINS

91400-1001		Steel, 100 pins, 1 g each, 0.5 – 1 ppm H
91400-1002		Steel, 100 pins, 1 g each, 1.5 – 4 ppm H

STEEL, BALLS (H)

91110 Steel, 100 balls, gold plated, 1 g each, >1.9 ppm H



OXYGEN IN COPPER, PINS

91000-1003 Copper, 100 pins, 1 g each, ~200 ppm O

91000-1004 Copper, 100 pins, 1 g each, ~10 ppm O



OXYGEN, NITROGEN AND HYDROGEN IN TITANIUM, PINS

91205-1001 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 10 – 35 ppm H



91205-1002 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 20 – 70 ppm H



91205-1003 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 30 – 90 ppm H



91205-1004 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 60 – 120 ppm H



91205-1005 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 150 – 250 ppm H



91205-1006 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 120 – 150 ppm H

HYDROGEN AND CARBON IN TITANIUM, PINS (250 MG)

91305-1001 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, < 50 ppm H

91305-1002 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, 50 -100 ppm H

91305-1003 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, > 100 ppm H