




ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

The compact benchtop model

The BB 50 is the smallest model of the RETSCH jaw crusher series and has been specially designed for sample preparation in the laboratory. The compact machine fits on any laboratory bench and offers safe and convenient handling.

The RETSCH jaw crusher series is available in 8 different sizes. Throughput and final fineness depend on the crusher type, selected gap width and breaking properties of the sample material.

Robust design, simple handling and cleaning are the features of the RETSCH jaw crusher models. Small amounts of sample are processed batchwise; for larger amounts the crushers can be operated continuously.

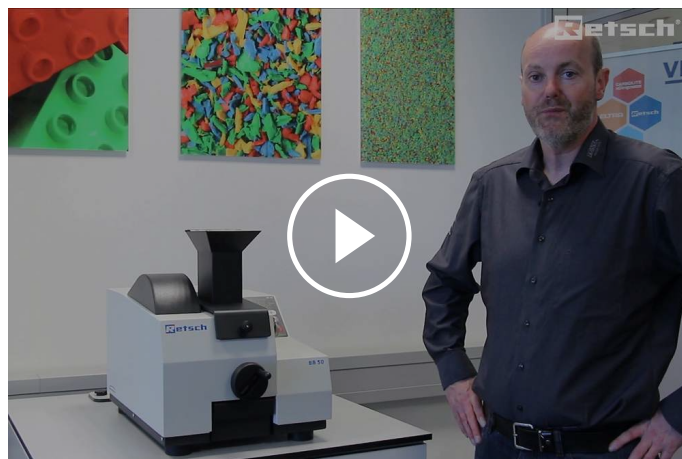


[Click to view video](#)


Product Video

POWERFUL & COMPACT

- High crushing efficiency, feed sizes up to 40 mm can be crushed to 0.5 mm
- Removable jaw for easy cleaning
- Adjustable speed allows adaptation to sample characteristics
- Wear compensation with zero-point adjustment
- Convenient operating keypad with digital display
- Memory for gap width setting

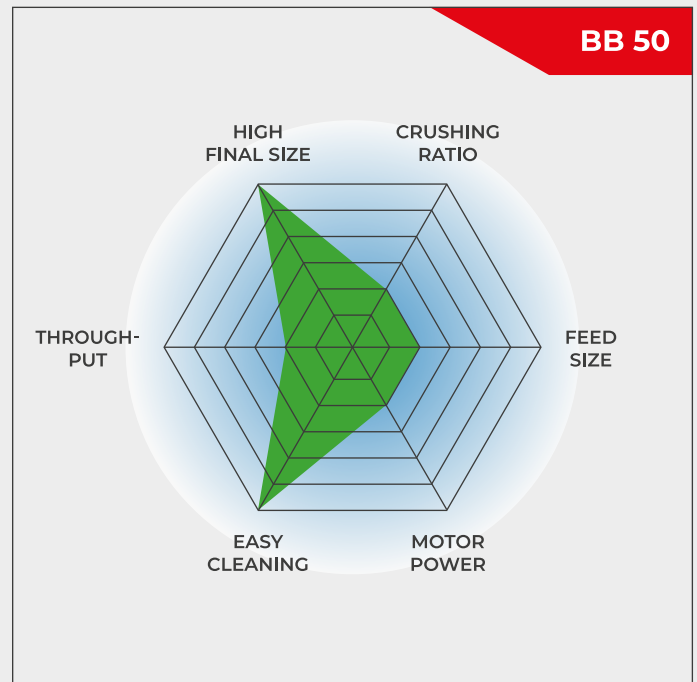

Small, powerful benchtop unit

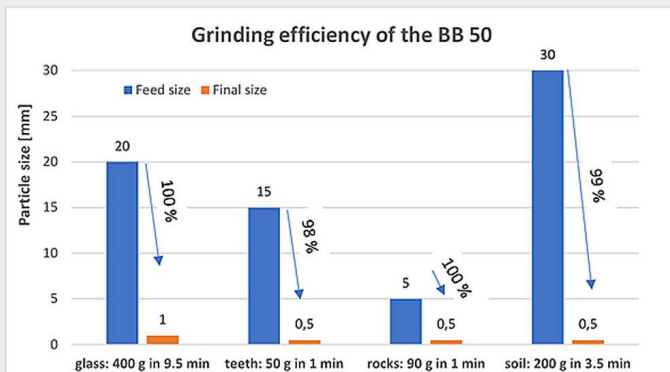

ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

SUPERIORITY IN DETAIL

The BB 50 is designed for efficient and convenient size reduction. The variable speed can be set between 550 and 950 min⁻¹ to adapt the crushing process to sample requirements. The possibility to reverse the rotating direction is helpful if too much sample material has been fed to the crusher causing it to block. The simple push of a button restarts the process. Due to permanently lubricated bearings and its solid design, the BB 50 jaw crusher is virtually maintenance-free.



Fold-back hopper can be removed for easy access



Digital speed setting and display of gap width




Large collection receptacle (3 l) with optional lid

ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

ZERO POINT ADJUSTMENT

An advantage of the jaw crusher BB 50 is the so-called zero point adjustment. Sooner or later, the breaking jaws will show signs of wear which will affect the reproducibility of the size reduction process. This effect can be compensated by adjusting the zero point. A sign in the display indicates if the jaws need to be replaced altogether, thus helping to avoid damages to the crusher.

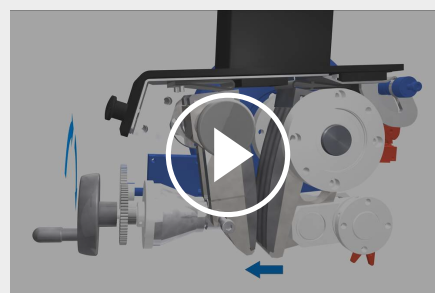

[Click to view video](#)

ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

EASY OPERATION & CLEANING

Working with the BB 50 jaw crusher is easy and safe. The large, clearly structured operating panel allows for digital display of parameters such as gap width and speed. The sample material is conveniently fed to the crusher via the large hopper equipped with splash-back protection.

For easy cleaning the fold-back hopper and crusher arm can be removed without using tools. The user can also exchange the breaking jaws if the crusher needs to be converted for different applications.



[Click to view video](#)

CYCLONE SYSTEM FOR JAW CRUSHERS

BYE-BYE DUST AND SAMPLE LOSS

Whether you're preparing samples in mining, precious metals, materials research, or environmental analysis, the RETSCH Cyclone System ensures efficiency, precision and safety like never before!



Why should you choose the RETSCH Cyclone System?

| Total Sample Recovery

Eliminate sample loss during crushing with our cyclone, ensuring accurate and reproducible results for every analysis!

| Enhanced Operator Safety

Our cyclone significantly reduces dust exposure, creating a safer and cleaner working environment for your team!

Plus: Existing instruments (BB 50, BB 250, BB 400 or BB 500) can be retrofitted with the Cyclone System.

FOR SAFE AND EFFICIENT CRUSHING PROCESSES

ACCESSORIES FOR THE JAW CRUSHER BB 50

Breaking jaws and wearing plates are available in five different materials to be selected depending on the sample and the analysis to be carried out:

- | манганова стомана
- | неръждаема стомана
- | волфрамов карбид
- | циркониев оксид
- | стомана за смилане без присъствие на тежки метали

The optional lid for the collecting receptacle of the jaw crusher ensures that the fine residues from previous samples fall on the lid and not into the receptacle which helps to avoid cross contaminations.



ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

ТИПИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОБА

RETSCH's powerful jaw crushers are ideally suited for preliminary crushing of construction materials, ores, granite, oxide ceramics, quartz, slag, silicon, coal, tungsten alloys, cement clinker, etc.



бетон



jade



стъкло



coal

To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.


ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Челюстната трошачка BB 50 е здрава и мощна. Захранващият материал преминава през бункера и влиза в смилащата камера.

Намаляването на размера се извършва в зона с клиновидна форма между неподвижната и движеща се челюст, посредством ексцентрично движещ се вал. Чрез елиптични движения се разтрошава пробата, която посредством гравитацията попада надолу.

Когато пробата стане по-малка от разстоянието между челюстите тя пада в събирателния колектор. Непрекъснатата настройка ширината на луфта с цифров дисплей гарантира оптимално намаляване на размера в съответствие с зададената стойност с ширина на луфта.

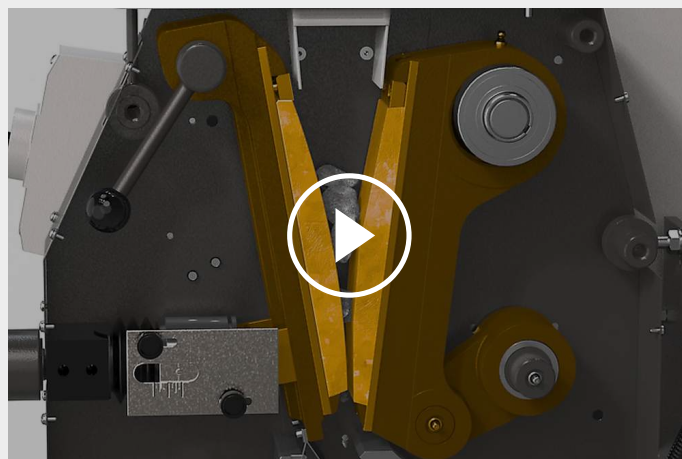

[Click to view video](#)

ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА BB 50

TECHNICAL DATA

Приложения	едро смилане и предварително намаляване на размерите
Област на приложение	биология, геология / металургия, медицина / фармация, селското стопанство, строителни материали, стъкло / керамика
Материали	средно твърди, твърд, крехък, жилави
Принцип на смилане	налягане
Максимален размер на захранващият продукт	< 40 мм
Големина след смилане*	< 0.5 мм
Производителност*	3 л/партида
Материал на смилещите части	манганова стомана, неръждаема стомана, волфрамов карбид, циркониев оксид, стомана 1.1750 (за смилане без присъствие на тежки метали)
Разстояние между челюстите	45 x 59 мм
Настройване на разстоянието	0 - 11 мм, стъпка през 0.1 mm
Изобразяване на разстоянието:	дигитално
Зануляване разстоянието между челюстите:	да
Реверсно движение	да
Отваряне на бункера	да
Прахоуловител	прахово уплътнен
Система за централно смазване	с вградена система за смазване без поддръжка
Версия за ползване при поточна линия	да, чрез премахване на събирателния съд
Капацитет на колектора	3 л
Задвижване	3-фазен мотор с честотен преобразовател
Мощност на двигателя	1.1 kW
Данни за електрозахранването	различни напрежения
Захранване	еднофазово
Защита	IP 20 / IP 00 при вентилационните отвори
Размери затворена	420 x 460 x 560 мм
Нетно тегло	~ 79 кг
Стандарти	CE

* в зависимост от захранващият материал и настройките на инструмента*

www.retsch.com/bb50

ДАННИ ПОРЪЧКА

JAW CRUSHER BB 50

Jaw Crusher BB 50 complete with breaking jaws and wearing plates

				breaking jaws / wearing plates
20.062.0001		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	manganese steel / stainless steel
20.062.0002		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	stainless steel / stainless steel
20.062.0009		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	stainless steel waved / stainless steel
20.062.0003		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	tungsten carbide / tungsten carbide
20.062.0004		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	zirconium oxide / zirconium oxide
20.062.0005		BB 50	200–240 V, 50/60 Hz	steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination

CYCLONE FOR BB 50

CYCLONE SET WITH HOLDER, CONNECTING ELEMENT, LID WITH CONNECTOR FOR VACUUM CLEANER AND SAMPLE OUTLET
(PLEASE ORDER CASSETTE WITH OUTLET SEPARATELY)

22.935.0038	Cyclone set with sample bottles 0.25 and 0.5 liters
02.183.0140	Cassette with outlet for use with cyclone
02.605.0420	Adjustable steel connection tubing (316L) for cyclone set
05.707.0208	FDA certified hose, 1.5 m
22.748.0017	Industrial vacuum cleaner Attix, 230 V, 50/60 Hz

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 50

BREAKING JAWS BB 50

22.048.0014		Breaking jaws manganese steel
-------------	---	----------------------------------

1 pair

22.048.0012



Breaking jaws
неръждаема стомана
1 pair

22.048.0023

Breaking jaws
stainless steel, waved
1 pair

22.048.0010



Breaking jaws
tungsten carbide
1 pair

22.048.0011



Breaking jaws
zirconium oxide
1 pair

22.048.0016



Breaking jaws
steel 1.1750
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

WEARING PLATES BB 50

22.711.0015

Wearing plates
неръждаема стомана
1 pair

22.711.0016



Wearing plates
tungsten carbide
1 pair

22.711.0017



Wearing plates
zirconium oxide
1 pair

22.711.0018



Wearing plates
steel 1.0344
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

FURTHER ACCESSORIES BB 50

03.050.0437



Cover lid for collecting receptacle

05.242.0038



V-belt, 1 bucată

22.825.0005



Carry handles, 1 pair