



NUMUNE AYIRICI PT 100

Doğru numune alma işlemi kusursuz ve karşılaştırılabilir analizle yakından ilgilidir. Anlamlı analiz sonuçları,örnek malzemenin doğru seçimi ile gerçekleşir. PT100,numuneleri tam olarak bölme işlemi gerçekleştirir.Malzeme besleme ve bölme işlemi otomatik olarak,numune kaybı olmadan aralıksız gerçekleşir. PT100, besleme ünitesi,farklı başlık seçenekleri,farklı kapasite numune şişeleri ile çeşitli çalışma seçenekleri sunar.



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

ÜRÜN AVANTAJLARI


- | Modern analitik cihazlara uygun, yüksek hassasiyette bölme
- | Modüler tasarım
- | Besleme ünitesiyle eş zamanlı, malzemenin otomatik olarak ilavesi
- | Numune şişelerinin kolay ve hızlı bir şekilde tutulması için, çabuk çıkarılabilen kilit sistemi
- | Dijital zaman ayarı
- | Hızın ekranda görüntülenmesi ve sabit tutulması
- | Besleme sistemleri ve numune toplama haznesi değişik bölmeli başlıklar içeren geniş aksesuar aralığı
- | Kompakt, kolay temizleme

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri..., çimento klinker

FONKSIYON PRENSIBI

Bir merkezden uzakta bulunan besleme hunisi, bölünmüş malzemeyi, doğrudan bölme deliklerine akmasını sağlar. Bu işlem, kaba malzemelerin, örnek şişelerde küçük yada ihmal edilebilecek bir sapma ile toplanmasına yol açar. Bölme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Hız kontrollü bölme, yükten bağımsız dakikada 110 devir yapacak şekilde döner. On çıkışlı bir bölme kullanırken, besleme akışı ile 1100 bireysel örnek her dakika ayrılmıştır demektir. Bölme başlıkları çeşitli boyutlarda mevcuttur ve örnek şişeler arasında eşit malzeme bölüşümü gerçekleşir.

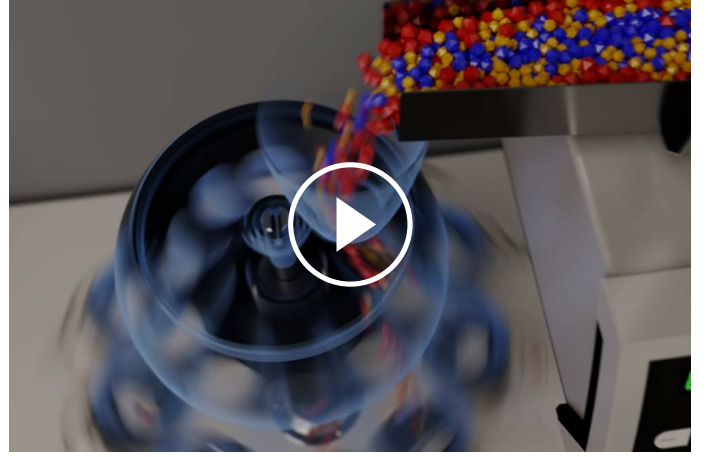

[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

NUMUNE AYIRICI PT 100

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	Numune bölme ve azaltma
Uygulama alanı	biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..
Besleme malzemesi	yüksek miktarda malzeme
Malzeme giriş büyüklüğü	Ürün Özellikleri
Parti boyutu / besleme miktarı	Ürün Özellikleri
Dönüş hızı	110 min-1
Bölüm sayısı	6 / 8 / 10
Zaman ayarı	dijital, 1, 3, 5, 10 - 60 dk ...
Konteyner hacmi	30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml
Elektriksel veriler	100-240 V, 50/60Hz
Güç bağlantısı	1-faz
G x Y x D	580 x 910 x 420 mm (DR 1 dahil)
Net ağırlık	~ 33.5 kg (DR 100 dahil)
Standartlar	CE

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

www.retsch.com/pt100

SIPARIŞ BİLGİSİ

NUMUNE BÖLÜCÜ PT 100

PT 100 drive unit

(please order vibratory feeder, feeding kit, dividing head and sample bottles separately)

40.535.0001



PT 100 motor ünitesi 100–240 V, 50/60 Hz

10 MM'YE KADAR BESLEME BOYUTLARI İÇİN BÖLME KAFALARI

42.793.0003



Alüminyum sert eloksallı ayırma başlığı, GL 55 iplik
6 hızlı açılan numune çıkışı ile

42.793.0001



Alüminyum sert eloksallı ayırma başlığı, GL 55 thread
8 hızlı açılan numune çıkışı ile

42.793.0002



Alüminyum sert eloksallı ayırma başlığı, 10 hızlı açılan numune çıkışı ile GL 55 iplik

42.793.0007



POM'un ayırma başlığı, GL 55 iplik
8 hızlı açılan numune çıkışı ile

22.523.0001



Numune şişeleri, GL 55 iplik, 250 ml, 10 adet

22.523.0002



Numune şişeleri, GL 55 iplik, 500 ml, 10 parça

5 MM'YE KADAR BESLEME BOYUTLARI İÇİN BÖLME KAFALARI

42.793.0009



Alüminyum sert eloksallı ayırma başlığı, 8 hızlı açılan numune çıkışı ile GL 45 iplik

22.523.0003



Duran laboratuvar şişeleri, GL 45 iplik, 100 ml, 10 adet
bölme başlığı 42.793.0009

22.523.0004



Duran laboratuvar şişeleri, GL 45 iplik, 250 ml, 10 adet
bölme başlığı 42.793.0009

22.523.0005



Duran laboratuvar şişeleri, GL 45 iplik, 500 ml, 10 adet
bölme başlığı 42.793.0009

42.018.0001



Beher 30 ml ve kapaklı destek
bölme başlığı 42.793.0009

42.156.0001



Spare beaker with lid 30 ml, 10 pcs.

AKSESUARLAR PT 100

03.785.0146



Hazne, paslanmaz çelik, hacim 2,8 l (DR 100 olmadan kullanılan PT 100 için)

03.742.0013



Hazne için koruyucu toz kapağı, POM

99.200.0015

PT 100 için IQ / OQ Belgeleri

VIBRATORY FEEDER DR 100 FOR PT 100

DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001



DR 100 motor ünitesi

220–240 V, 50 Hz

70.938.0002



DR 100 motor ünitesi

110–120 V, 60 Hz

72.020.0021

Feeding kit DR 100-75/40 for PT 100,
incl. push-fit feed chute 75/40 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 3.5 litres, fixture for hopper and stand with data cable